

DURAVERVANGING

SYNTHETISCHE, BIOLOGISCHE EN ONLAY SUBSTITUTEN
VOOR HET SLUITEN VAN DE DURA EN PREVENTIE VAN CSF-LEKKAGE



DURAVERVANGERS

Biologische en synthetische duravervangers worden gebruikt om lekkage van cerebrospinale vloeistof (CSF) en infecties te voorkomen. AEscuLAP® duravervangers stimuleren de groei van dura-achtig weefsel om de opening te sluiten. En zijn verkrijgbaar als hechtbare implantaten en onlay variant.

AESCULAP® Lyoplant® Onlay

Biologische duravervanger



SNEL. VEELZIJDIG. BETROUWBAAR. RESORBEERBAAR.

Lyoplant® Onlay is een tweelaags biologisch resorbeerbare duravervanger. De 'onlay' techniek laat zonder hechtingen een snelle en eenvoudige sluiting van de dura toe. Voorafgaand aan de implantatie wordt geadviseerd om Lyoplant® Onlay in een steriele zoutoplossing, of in een andere isotone oplossing, te leggen om de soepelheid en flexibiliteit van het implantaat te garanderen. Lyoplant® Onlay wordt na implantatie langzaam enzymatisch afgebroken en vervangen door het eigen bindweefsel van het lichaam.

VOORDELEN

- Resorbeerbaar tweelaags implantaat hecht zich aan de dura-opening
- Dura sluiten zonder hechten kan kostbare operatietijd besparen
- Wanneer gewenst is Lyoplant® Onlay ook hechtbaar
- Dun materiaal voor onlay variant (2,62 mm droog gemeten)*
- Elastisch en flexibel, past zich aan naar omliggende anatomische structuren
- Gemakkelijk op maat te knippen of snijden
- Één duravervanger voor verschillende indicaties, geschikt voor craniaal en spinaal gebruik




Formaten	Besteleenheid	Artikelnr.
2.5 x 2.5 cm	1 stuk	106 7010
5.0 x 5.0 cm	1 stuk	106 7020
2.5 x 7.5 cm	1 stuk	106 7030
7.5 x 7.5 cm	1 stuk	106 7040
10.0 x 12.5 cm	1 stuk	106 7050

VRAAG SAMPLE KAART AAN!

C88102

Sample kaart Lyoplant® Onlay


Kaart met productspecificaties en sample van het product.

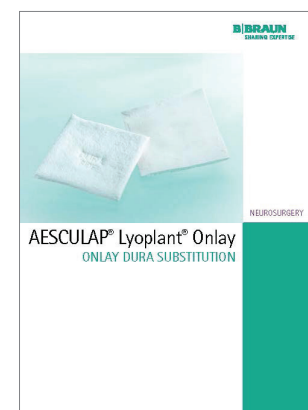

* Dikte van biologisch materiaal kan variëren met een minimaal verschil.

AESFULAP[®] Lyoplant[®]

Biologische duravervanger, hechtbaar

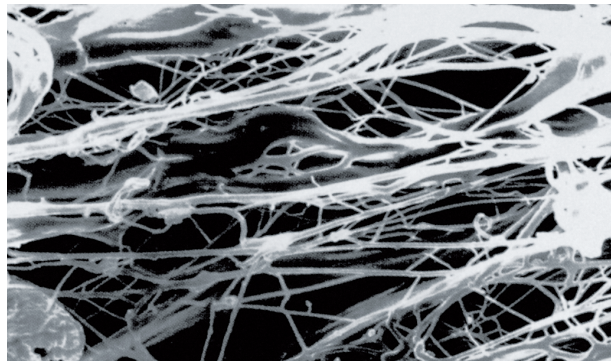

FUNCTIONEEL. SCHEURVAST. RESORBEERBAAR.

Lyoplant[®] is een implantaat van puur collageen dat wordt vervaardigd van bovine pericardium. Dit sterk gezuiverde collageen staat bekend om zijn lage neiging om immunologische reacties te veroorzaken. Het speciale vriesdroogproces garandeert dat de losse vezelstructuur van Lyoplant[®] behouden blijft voor optimale ingroei. Lyoplant[®] wordt na implantatie langzaam enzymatisch afgebroken en vervangen door het eigen bindweefsel van het lichaam.

VOORDELEN

- Resorbeerbaar implantaat van sterk gezuiverd collageen
- Losse vezelstructuur, scheurvast
- Sterke structuur voorkomt uitscheuren van hechtingen
- Goed hechtbaar met atraumatische ronde naalden
- Gemakkelijk op maat te knippen of snijden

Geschikte hechtdraden

Optilene[®] polypropyleen/polyethyleen (monofilament)

Premicron[®] polyester (gevlochten)


Formaten	Besteleenheid	Artikelnr.
6 x 14 cm	1 stuk	106 6021
8 x 9 cm	1 stuk	106 6030
6 x 8 cm	1 stuk	106 6242
5 x 6 cm	1 stuk	106 6050
4 x 10 cm	1 stuk	106 6048
4 x 5 cm	2 stuks	106 6064
2 x 10 cm	2 stuks	106 6080
1.5 x 3 cm	2 stuks	106 6102

VRAAG SAMPLE KAART AAN!

C87902


Sample kaart Lyoplant[®]

Kaart met productspecificaties en sample van het product.

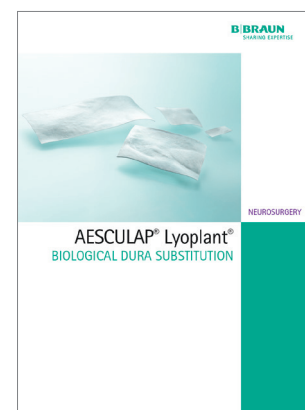

AESFULAP® Neuro-Patch®

Synthetische duravervanger, hechtbaar

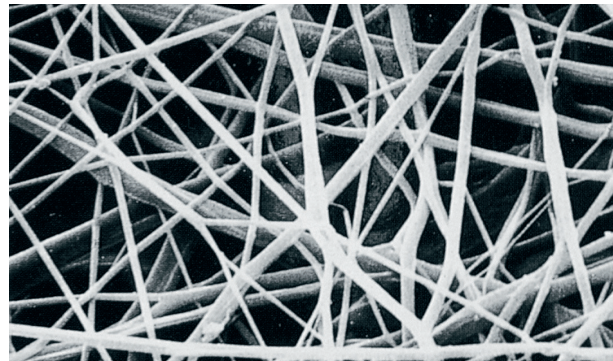

ELASTISCH. VERDRAAGZAAM. NIET-RESORBEERBAAR.

Neuro-Patch® is een microporeus vlies vervaardigd van een hoogzuiver polyesterurethaan. De fijnvezelige microstructuur ondersteunt een snelle ingroei.

VOORDELEN

- Elastisch fijnvezelig microporeus fleece
- Hoge vloeistofdichtheid voorkomt CSF-lekkage
- Sterke structuur voorkomt uitscheuren van hechtingen
- Goed hechtbaar met atraumatische ronde naalden
- Gemakkelijk op maat te knippen of snijden

Geschikte hechtdraden

Optilene® polypropyleen/polyethyleen (monofilament)

Premicron® polyester (gevlochten)


Formaten	Besteleenheid	Artikelnr.
12 x 14 cm	1 stuk	106 4002
6 x 14 cm	1 stuk	106 4010
8 x 9 cm	1 stuk	106 4020
6 x 8 cm	1 stuk	106 4029
5 x 6 cm	1 stuk	106 4040
4 x 10 cm	1 stuk	106 4037
4 x 5 cm	2 stuks	106 4045
2 x 10 cm	2 stuks	106 4053
1.5 x 3 cm	2 stuks	106 4061

VRAAG SAMPLE KAART AAN!

C87802

Sample kaart Neuro-Patch®

Kaart met productspecificaties en sample van het product.

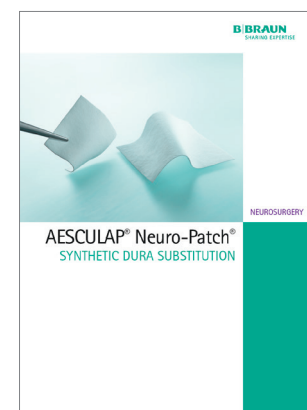

AESCULAP[®] – a B. Braun brand

B. Braun Medical B.V. | +31 412 67 24 11 | customer care.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl



De merknaam "Aesculap" is een geregistreerd merk van Aesculap AG.

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

