



VEILIG BEREIDEN


PROTECTIVE ADMIXTURE TOOLS

Veilig bereiden

Als professional in de gezondheidszorg heeft u producten nodig die gebruiksvriendelijk zijn en de veiligheid van u en uw patiënten waarborgen.

In een arbeidsintensieve en geconditioneerde omgeving moeten talrijke medicijnen snel bereid worden. Hierbij bestaat het gevaar van contaminatie en/of prikaccidenten.

B. Braun biedt een uitgebreid assortiment producten om bereidingen veiliger en eenvoudiger te maken.

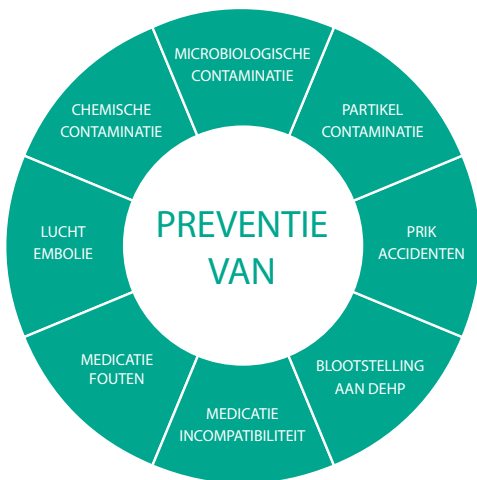

Index

Toebehoren bij het mengen van vloeistoffen

Ecoflac® Connect

Ecoflac® Mix

Connector vr/vr Luer-lock

MAC1001 Multi-Ad

4100 Multi-Ad set

Transofix®

Filters voor bereidingen

Sterifix® filterrietje

Sterifix® injectiefilter

Sterifix® Pury

Sterifix® filternaald

Bereidingsspikes

Mini-Spike® Groen

Mini-Spike® Blauw

Mini-Spike® Chemo

Mini-Spike® 2 Groen

Mini-Spike® 2 Blauw

Mini-Spike® 2 Chemo

DP3500L bereidingsspike Luer-lock onbelucht met Safsite®

DP2500L bereidingsspike Luer-lock belucht met Safsite®

Connectoren

Puresite connector

Combifix adapter

In-stopper

Safeflow connector

Afsluitdoppen

Puresite cap

Tec1000 afsluitdop

Sc2000 afsluitdop Luer-lock

SCF afsluitdop

Combi-stopper

Filters- en optreknaalden

Sterican® Mix

Sterifix® filternaald

Sterifix® filterrietje

Ecoflac® Connect




Artikelnummer	Z-indexnummer	Maat	Min. bestel-eenheid	Verpakking
4090549	16756592	S	50	1x50
4090550	15600416	M	50	1x50
4090552	16756622	L	50	1x50

Wat is Ecoflac® Connect?

Een transferkap voor een gesloten overdracht van vloeistoffen tussen een Ecoflac® container en een flacon. Het reduceert een groot aantal stappen in de bereiding. Ecoflac® Connect wordt éénmalig aangesloten op Ecoflac®. De transferkap is verkrijgbaar in drie maten.

Wat zijn de voordelen?

- Naaldloze bereiding
> geen prikaccidenten
- Gesloten systeem
> voorkomt chemische- en microbiologische contaminatie
> geeft een stabiele connectie
- Geneesmiddelflacon kan aangesloten blijven
> minimaliseert medicatiefouten
- Geïntegreerd ventiel
> geen lekkage
- Kortere bereidingstijd
> economisch voordelig

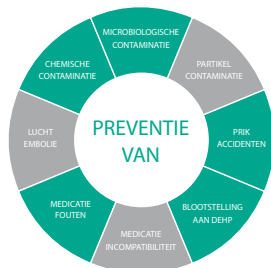

Ecoflac[®] Mix




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. bestel- eenheid	Verpakking
16401	16756622	250	1x250

Wat is Ecoflac® Mix?

Transferset voor het mengen van vloeistoffen. Na het mengen kan Ecoflac® Mix verwijderd worden.

Wat zijn de voordelen?

- Speciaal ontworpen voor Ecoflac®
> geeft een stabiele connectie
- Naaldloze bereiding
> geen prikaccidenten
- Kortere bereidingstijd
> economisch voordelig

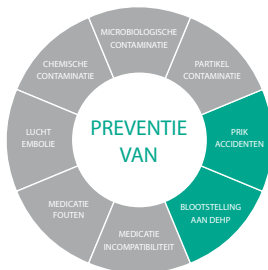

Transofix®




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. bestel-eenheid	Verpakking
4090500	14615592	50	1x50

Wat is Transofix®?

Een transferspike geschikt voor het snel en lekvrij mengen van steriele vloeistoffen en/of oplossingen van medicatie in poedervorm.

Wat zijn de voordelen?

- Grote interne diameter
> maakt een hoge flow mogelijk
- Naaldloze bereiding
> geen prikaccidenten

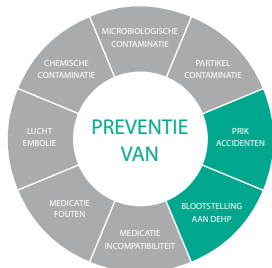

Connector vr/vr Luer-lock




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. bestel-eenheid	Verpakking
415080	15986004	100	1x100

Wat is Connector vr/vr Luer-lock?

De connector maakt een veilige en goede verbinding tussen twee spuitjes mogelijk. Kleine spuitjes kunnen daardoor bijvoorbeeld eenvoudig met een grote spuit uitgevuld worden.

Wat zijn de voordelen?

- Luer-lock aansluiting aan beide zijden
> veilige en goede verbinding
- Veilige ontluchting van de spuit
> lucht bevindt zich altijd in het bovenste gedeelte van de spuit.
- Ergonomische grip
> eenvoudig in gebruik

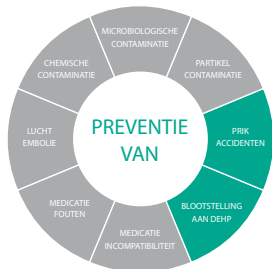

Multi-Ad Fluid Dispensing System



Artikel omschrijving	Artikel nummer	Z-index nummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
MAC1001 Multi-Ad Fluid dispensing system	513506	16799496	10	1x10
MAT 4100 Multi-Ad set	513548	14999021	20	1x20

Wat is MAC1001 Multi-Ad Fluid Dispensing System?

Gesloten systeem voor het uit- en afvullen.

Wat zijn de voordelen?


- Identieke volumes kunnen snel herhaald worden
> maakt het teruggaan naar de eerder ingestelde waarden mogelijk
- Ergonomische grip
> eenvoudig in gebruik
- Gesloten verbinding en terugslagventiel
> minimaliseert microbiologische contaminatie

Wat is MAT 4100 Multi-Ad set?

Gesloten systeem voor het uit- en afvullen.

Wat zijn de voordelen?

- Gesloten verbinding en terugslagventiel
> minimaliseert microbiologische contaminatie

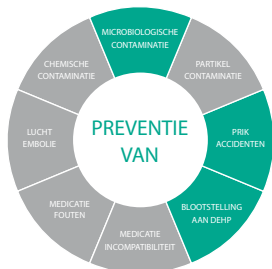

Sterifix[®] filterrietje




Artikel nummer	Z-index nummer	Filter	Lengte	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550250	15600858	5 m μ	4,5 cm	200	4x50
4550200	15599957	5 m μ	10 cm	200	4x50

Wat is Sterifix® filterrietje?

Sterifix® filterrietje kan worden gebruikt bij glasampullen. Bij het openbreken van glasampullen kunnen er glaspartikels in de ampul terecht komen. Het Sterifix® filterrietje filtert de inhoud van de glasampul en voorkomt dat glaspartikels toegediend worden.

Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
> minimaliseert glaspartikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- In twee lengtes verkrijgbaar
> ook geschikt voor kleine glasampullen
- Rietje is buigzaam
> geschikt om met ampul in de hand te aspireren

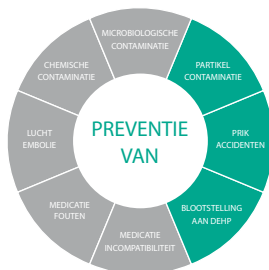

Sterifix® Pury




Artikelnummer	Z-indexnummer	Filter	Min. bestel eenheid	Verpakking
4551001	14615509	5 mμ	100	1x100

Wat is Sterifix® Pury?

Sterifix® Pury 5 µm partikelfilter wordt gebruikt bij het aspireren of injecteren van vloeistoffen. Het filter houdt de partikels groter dan 5 µm tegen. Bij het uitvullen moet Sterifix® Pury worden verwijderd, zodat partikels niet in de oplossing terecht komen.

Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
> minimaliseert partikelcontaminatie
- Luer-lock aansluiten
> kan gebruikt worden bij het aspireren met een Sterican® Mix Blunt of Sterican® Mix Semi-blunt naald

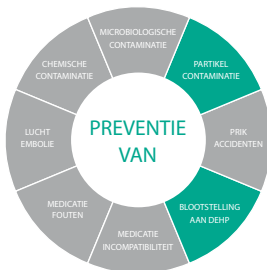

Sterifix[®] filter




Artikel nummer	Z-index nummer	Filter	Min. bestel eenheid	Verpakking
4099206	14615495	0,2 µm	200	4x50

Wat is Sterifix® filter?

Sterifix® filter (tolletje) is voorzien van een 0,2 µm bacteriefilter en Luer-lock aansluitingen. Het wordt gebruikt bij het uitvullen van vloeistoffen.

Wat zijn de voordelen?

- Bacteriefilter 0,2 µm
 - > minimaliseert microbiologische contaminatie

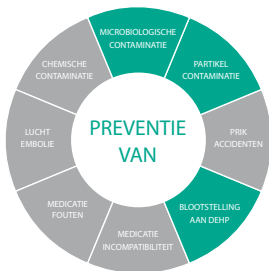

Mini-Spike® Groen




Artikel nummer	Z-index nummer	Specificatie	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550242	14618834	-	100	2x50
4550510	14678012	micro-tip	100	2x50
4550560	14888068	ventiel	100	2x50

Wat is Mini-Spike® Groen?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm
> reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
> minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
> speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
> voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

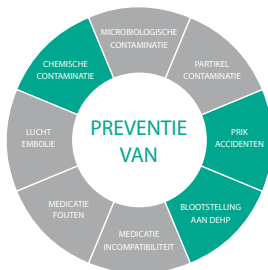

Mini-Spike® Blauw




Artikel nummer	Z-index nummer	Specificatie	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550234	14618826	Filter	100	2x50
4550579	14888076	Filter v	100	2x50
4550560	14678004	Filter micro-tip	100	2x50

Wat is Mini-Spike® Blauw?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm en partikelfilter 5 µm
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
 - > minimaliseert partikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
 - > voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

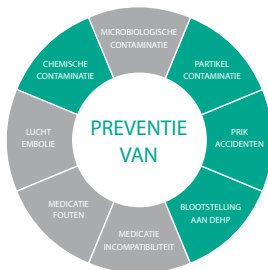

Mini-Spike® Chemo




Artikel nummer	Z-index nummer	Specificatie	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550340	14618842	Chemo	100	2x50
4550587	14888084	Chemo v	100	2x50
4550536	14678020	Chemo micro-tip	100	2x50

Wat is Mini-Spike® Chemo?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Aerosolfilter 0,2 µm
 - > voorkomt het vrijkomen van aerosolen
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
 - > voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

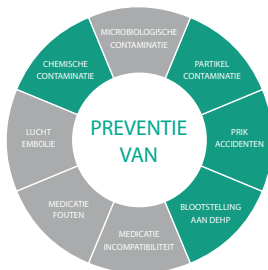

Mini-Spike® 2 Groen




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550590	16068904	100	2x50

Wat is Mini-Spike® 2 Groen?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® 2 met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm
> reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
> creëert een gesloten systeem
> voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
> minimaliseert chemische contaminatie

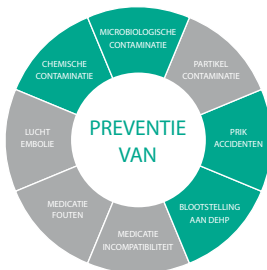

Mini-Spike® 2 Blauw




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550591	16068912	100	2x50

Wat is Mini-Spike® 2 Blauw?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm en partikelfilter 0,5 µm
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
 - > minimaliseert partikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
 - > creëert een gesloten systeem
 - > voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemisch contaminatie

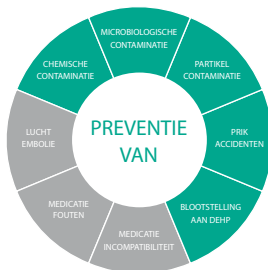

Mini-Spike® 2 Chemo




Artikel nummer	Z-index nummer	Specificatie	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550592	16068920	Chemo	100	2x50
4550595	-	Chemo micro-tip	100	2x50

Wat is Mini-Spike® 2 Chemo?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® 2 met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Aerosolfilter 0,2 µm
 - > voorkomt het vrijkomen van aerosolen
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
 - > creëert een gesloten systeem
 - > voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials

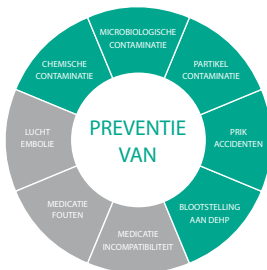

Bereidingsspike Luer-lock




Artikel omschrijving	Artikel nummer	Z-index nummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
DP3500L onbelucht	413501	14618702	50	1x50
DP2500L belucht	412006	14618680	50	1x50

Wat is Bereidingsspike Luer-lock met Safsite®?

Een high flow bereidingsspike met geïntegreerd Safsite® 2-weg ventiel voor herhaald injecteren en aspireren van vloeistoffen. Verkrijgbaar zonder beluchting voor infuuszakken en flexibele kunststof containers en met beluchting voor glazen flessen.

Wat zijn de voordelen?

- Het grote lumen van de spike
>garandeert een snelle vloeistofdoorstroming
- Luer-lock aansluiting met een kraag
> minimaliseert chemische contaminatie
- Het Safsite® 2-weg ventiel voorkomt lekkage
> speciaal bij omgekeerde containers

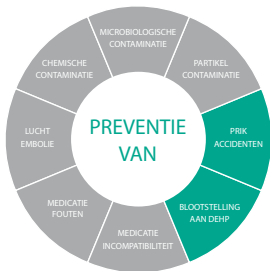

PureSite Connector & Cap




Artikel omschrijving	Artikel nummer	Z-index nummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
Connector	4551105	16637593	200	2x100
Cap	4551101	16068890	200	2x100

Wat zijn PureSite Connector en PureSite Cap?

PureSite Connector biedt een permanente connectie en daarmee een goede bescherming tegen chemische en microbiologische contaminatie tijdens bereiden, transport en toedienen van medicatie. PureSite Cap is speciaal voor het afsluiten van PureSite Connector.

Wat zijn de voordelen?

- Permanente connectie met de vrouwelijke Luer-lock op een spuit of infuussysteem
 - > minimaliseert chemische en microbiologische contaminatie
 - > voorkomt losraken tijdens vervoer
- Gesloten systeem met de mannelijke Luer-lock
 - > opent bij connectie en sluit automatisch bij het ontkoppelen

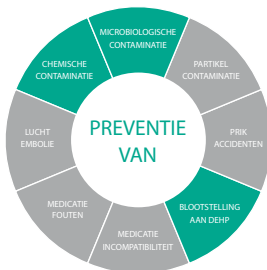

Combifix® adapter



Omschrijving	Artikel nummer	Z-index nummer	Min. bestel eenheid	Verpakking
vrouwelijk/ vrouwelijk	5206634	14618737	100	1x100
mannelijk/ mannelijk	5206642	14618745	100	1x100
vrouwelijk/ rekord	4090306	14997606	100	1x100

Wat is Combifix® adapter vrouwelijk/vrouwelijk?

Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen twee mannelijke aansluitingen.

Wat is Combifix® adapter mannelijk/mannelijk?


Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen twee vrouwelijke aansluitingen.

Wat is Combifix® adapter vrouwelijk/rekord?

Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen een mannelijke Luer-lock en een rekord aansluiting.

Wat zijn de voordelen?

- Diversiteit aan adapters
 - > maakt alle combinaties mogelijk

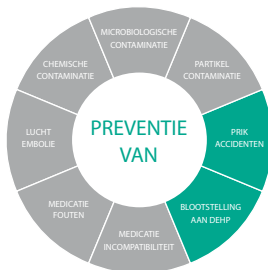

Safeflow connector




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. besteleenheid	Verpakking
409100H	15600378	50	1x50
409110H	16748743	50	1x50

Wat is een Safeflow connector?

Safeflow connector is een naaldloze, gesloten en desinfecteerbare connector voor veilige en eenvoudige infuustherapie.

Wat zijn de voordelen?

- Naaldvrije toegang
> minimaliseert de kans op prikaccidenten
- Gesloten systeem
> minimaliseert de kans op contaminatie
- Lipide resistent

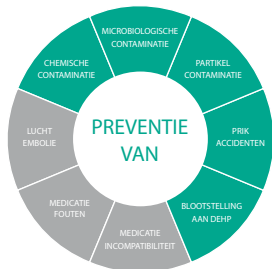

In-stopper




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. besteleenheid	Verpakking
4238010	15298809	1000	10x100

Wat is een in-stopper?

In-stopper is een afsluitdop met bijspuitmembraan voor intermitterende injecties

Wat zijn de voordelen?

- Naaldvrije toegang via latex-vrij membraan
> minimaliseert de kans op contaminatie
- Contactvrije luer aansluiting
> minimaliseert de kans op contaminatie
- Te gebruiken als afsluitdop voor vrouwelijke toegangspoorten

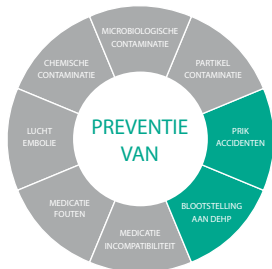

TEC1000 afsluitdop




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. besteleenheid	Verpakking
418004	15007553	500	50x10

Wat is TEC1000 afsluitdop?

Tweedelige afsluitdop voor het veilig afsluiten van spuit.

Wat zijn de voordelen?

- Transparante kap
 - > de kap wordt afgebroken bij ingebruikname van de spuit en kan niet meer teruggeplaatst worden
 - > hiermee kan vastgesteld worden of de Luer-lock spuit gebruikt of gemanipuleerd is
- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
 - > dop is met één hand te bevestigen
- Voorzien van een schroefdraad
 - > maakt een „lock“ verbinding mogelijk

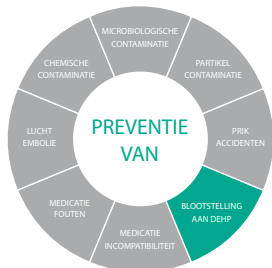

SC2000 afsluitdop Luer-lock




Artikelnummer	Z-indexnummer	Min. besteleenheid	Verpakking
418012	16062949	500	50x10

Wat is SC2000 afsluitdop Luer-lock?

Afsluitdop voor het afsluiten van spuiten.

Wat zijn de voordelen?

- Voorzien van een schroefdraad
 - > maakt een „lock" verbinding mogelijk
 - > zowel bij Luer-tip als bij Luer-lock spuiten te gebruiken
- De buitenrand van de dop is vierkant
 - > de spuiten kunnen niet van de tafel rollen en ook staand worden teruggezet
- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
 - > de dop is met één hand te bevestigen

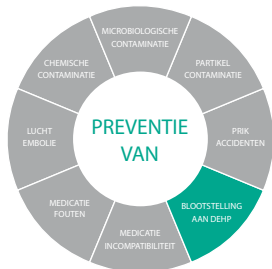

SCF afsluitdop




Artikel omschrijving	Artikel nummer	Z-index nummer	Kleur	Min. bestel eenheid	Verpakking
CSF130	418200	14618788	wit	600	20x30
CSF230	418202	14618761	blauw	600	20x30

Wat is SCF afsluitdop?

Een afsluitdop voor het afsluiten van spuiten.

Wat zijn de voordelen?

- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
> de dop is met één hand te bevestigen
- Geen schroefdraad
> maakt snel afdoppen mogelijk
> geschikt voor Luer-lock en Luer-tip spuiten
- De blisterverpakking zorgt voor steriliteit bij de ongeopende dopjes
> minder verspilling

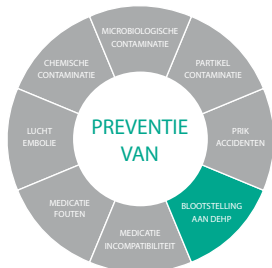

Combi-stopper




Artikelnummer	Z-indexnummer	Kleur	Min. bestel eenheid	Verpakking
4495101	14615541	rood	1000	10x100
4495152	14615533	wit	1000	10x100
4495209	14615568	blauw	1000	10x100

Wat is Combi-stopper?

Combi-stopper is de afsluitdop om zowel vrouwelijk als mannelijk Luer-lock aansluitingen af te sluiten.

Wat zijn de voordelen?

- Aan twee zijden te gebruiken
> altijd in te zetten
- Multifunctioneel ontwerp
> Luer-lock en Luer-slip aansluitingen mogelijk

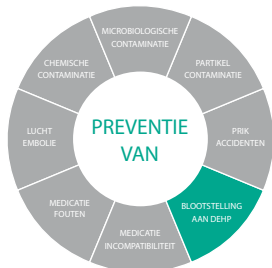

Sterifix[®] filternaald




Artikel nummer	Z-index nummer	Filter	Lengte	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550404	14616149	5 mμ	2,5 cm	50	1x50

Wat is Sterifix® filternaald?

Sterican® filternaald wordt gebruikt voor het aspireren of injecteren van medicatie. Het filter houdt de partikels groter dan 5 µm tegen.

Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
> minimaliseert partikelcontaminatie

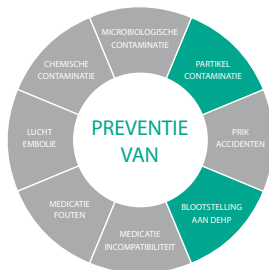

Sterican® Mix Blunt




Artikel nummer	Z-index nummer	Lengte	Min. bestel eenheid	Verpakking
4038088-01	15861333	1,20 x 40mm 18g x 1 ^{1/2}	1000	10x100

Wat is Sterican® Mix Blunt?

Sterican® Mix Blunt is een volledig stompe naald voor het optrekken van medicatie.

Wat zijn de voordelen?

- Stompe naald
 > voorkomt prikaccidenten
- Sterican® Mix Blunt wordt gebruikt met Sterifix® Pury
 > deze combinatie voorkomt prikaccidenten en partikelcontaminatie

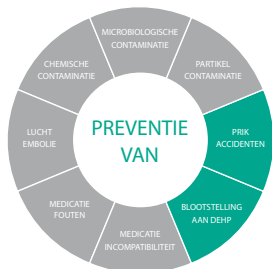

Sterican® Mix semi-blunt




Artikel nummer	Z-index nummer	Lengte	Min. bestel eenheid	Verpakking
4550400-01	15861333	1,20 x 40mm 18g x 1 ^{1/2}	1000	10x100

Wat is Sterican® Mix semi-blunt?

Sterican® Mix semi-blunt is een half stompe naald voor het bereiden van medicatie.

Wat zijn de voordelen?

- Half stompe naald
> minimaliseert prikaccidenten
- Sterican® Mix semi-blunt wordt gebruikt met Sterifix® Pury
> deze combinatie minimaliseert prikaccidenten en voorkomt partikelcontaminatie

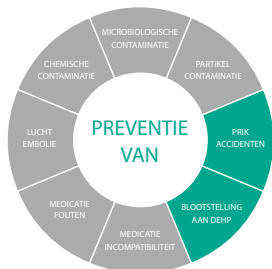

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.